

productoverzicht

Tarta Airy Control zitkussen


Airy is de nieuwe zitkussenlijn van Tarta. De modulaire zitkussens zijn ontwikkeld voor gebruikers met verschillende houdingsbehoeften. Het is ontworpen voor het comfort en welzijn van de gebruiker, waardoor meer functionaliteit en minder vermoeidheid optreedt. De zitkussens zijn geschikt voor actieve gebruikers en gebruikers met complexere houdingsbehoeften, doordat de zitkussens individueel aan te passen zijn. Daarnaast zorgt het speciale ademende vermogen voor een goede temperatuur- en vochtregulering.

Tarta Airy Control zitkussen

Het Tarta Airy Control zitkussen is een innovatief modulaair zitkussen. Doormiddel van cilinders van schuim van verschillende hardheden en/of lucht, kan de contour van het zitkussen worden aangepast. De cilinders kunnen in het koudschuim zitkussen gestoken worden op twaalf compartimenten zodat het kan worden ingesteld op de positioneringsbehoefte van de belanghebbende. Hierdoor kan bijvoorbeeld meer of minder talud, een asymmetrie in de bekkenstand of een asymmetrische heuphoek worden gecreëerd. Daarnaast is het kussen zeer goed ventilerend. De hoes is van een ventilerende 3D stof gemaakt en in het schuim zijn gaten aangebracht die voor luchtcirculatie zorgen. Het lichtgewicht positioneringskussen kan goed worden gebruikt bij veeleisende situaties waarbij een modulaire aanpassing noodzakelijk is.

De belangrijkste eigenschappen van het Tarta Airy Control zitkussen zijn:

- Laag in gewicht
- Stabiliteit waardoor schuifkrachten geminimaliseerd worden t.b.v. huidbescherming
- Volgt en ondersteunt de lichaamscontouren waardoor een juiste drukverdeling optreedt.
- De zitkussens zijn blijvend aanpasbaar, waardoor bij een veranderde houding of andere ondersteuningsbehoefte het eenvoudig aangepast kan worden.

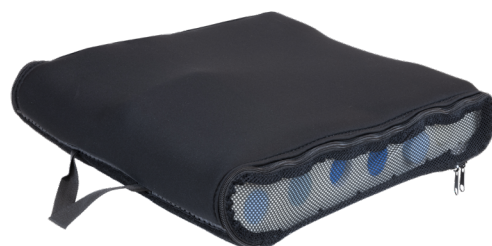

orderformulier

Tarta Airy zitkussen

Factuuradres:


Afleveradres (indien afwijkend van factuuradres)

Ordernummer:

Datum:

Referentie:

stel het product samen

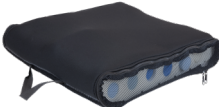basissamenstelling (basis code: TA_CC_AIR)		specificaties																																							
 zitkussen	+	 bekledingshoes	gewicht (40 x 40 cm) : 0,85 kg kussenhoogte  10 cm  8 cm max. gebruikersgewicht : 150 kg																																						
stap 1 bepaal de breedtemaat Bepaal de zitbreedte van de gebruiker en kies de bijbehorende breedtemaat in de tabel. Zitbreedte gebruiker cm Kies aan de hand van de zitbreedte de benodigde breedtemaat in de maattabel. Airy breedtemaat		maattabel Tarta Airy zitkussen <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="6">zitbreedte</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>36 cm</th> <th>38 cm</th> <th>40 cm</th> <th>42 cm</th> <th>44 cm</th> <th>46 cm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="3">zitdiepte</th> <th>40 cm</th> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>42,5 cm</th> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <th>46 cm</th> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>				zitbreedte								36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	zitdiepte	40 cm	X	X	X				42,5 cm	X	X	X	X	X		46 cm	X	X	X	X	X	X
		zitbreedte																																							
		36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm																																		
zitdiepte	40 cm	X	X	X																																					
	42,5 cm	X	X	X	X	X																																			
	46 cm	X	X	X	X	X	X																																		
stap 2 kies de dieptemaat Bepaal de zitdiepte van de rolstoel en kies de bijbehorende dieptemaat in de tabel. Zitdiepte rolstoel cm Kies aan de hand van de zitdiepte de benodigde dieptemaat in de maattabel. Airy dieptemaat																																									
artikelnummer zitkussen Stel het artikelnummer samen op basis van de gemaakte keuzes voorbeeld: TA=CC_AIR40X40 <table border="1"> <thead> <tr> <th>basis code</th> <th>breedtemaat</th> <th>dieptemaat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TA=CC-AIR</td> <td> </td> <td>X </td> </tr> </tbody> </table>				basis code	breedtemaat	dieptemaat	TA=CC-AIR		X																																
basis code	breedtemaat	dieptemaat																																							
TA=CC-AIR		X																																							

accessoires

Delta (verstevigings)plaat	extra bekledingshoezen (gebruik voor het artikelnummer, de maten van het kussen)												
☐ RSSI 1600 breedtemaat 40 - 43 cm, Diepte 35 - 45 cm ☐ RSSI 1800 breedtemaat 45 - 48 cm, Diepte 35 - 45 cm ☐ RSSI 2000 breedtemaat 50 - 55 cm, Diepte 45 - 50 cm	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>basis code</th> <th>breedte</th> <th>diepte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐ Bekledingshoes</td> <td>TA=FCC</td> <td> </td> <td>X </td> </tr> <tr> <td>☐ Incontinentiehoes</td> <td>TA_FI-C</td> <td> </td> <td>X </td> </tr> </tbody> </table>		basis code	breedte	diepte	☐ Bekledingshoes	TA=FCC		X	☐ Incontinentiehoes	TA_FI-C		X
	basis code	breedte	diepte										
☐ Bekledingshoes	TA=FCC		X										
☐ Incontinentiehoes	TA_FI-C		X										